



SONDA DE GASTROSTOMÍA

100% silicona para mejorar la comodidad del paciente



GASTROENTEROLOGIC
SERIES

SONDA DE GASTROSTOMÍA

Sonda de Gastrostomía de Silicona Fortune®:


- 100% silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Tubo blando con excelente flexibilidad para mejorar la comodidad del paciente.
- El tubo transparente y la línea radiopaca permiten una inspección visual.
- Marca de profundidad para localizar la posición del tubo.
- La punta redonda y abierta aumenta el flujo de la alimentación y disminuye el traumatismo durante la inserción
- La punta acortada reduce la irritación de la mucosa gástrica.
- Embudo con muchas arandelas interiores para conectar con otros equipos.
- Capuchón con tapa para estar bien sellado y evitar la contaminación y la entra del aire.
- El anillo de fijación previene el movimiento del tubo y elimina la sutura o el uso del esparadrapo
- No se ve bien el tubo cuando lleva la ropa normal y es más cómoda para el paciente.
- Puerto universal de medicación.
- Libre de látex/DEHP.



ESPECIFICACIONES

Sonda de Gastrostomía:

REF.	Tamaño Balón	Largo	Marca de Profundidad	Rayos X	Soporte
2019-0012	12FR	5-10cc			
2019-0014	14FR				
2019-0016	16FR	10-20cc	2		
2019-0018	18FR		4		
2019-0020	20FR	255 mm	6	Si	Si
2019-0022	22FR	15-20cc	8		
2019-0024	24FR		10		
2019-0026	26FR		cm		
2019-0028	28FR				

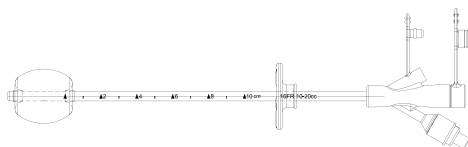

2019-00XX



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com

SONDA DE GASTROSTOMÍA CON CONECTOR ENFIT

Fortune® Sonda de Gastrostomía de Silicona con conector ENFit


- La sonda de gastrostomía de silicona con conector ENFit de color morado es blanda y flexible. La sonda incluye un anillo de silicona, un balón de silicona y un conector de 3 vías de silicona. Los componentes son de silicona de grado médico para mejorar la comodidad del paciente y la compatibilidad superior. Se reduce la incomodidad en contacto con el tubo.
- El Tubo transparente se facilita la inspección visual, y la línea radiopaca y la marca de profundidad ayuda la confirmación fácil y precisa de la posición del tubo por rayos X.
- El extremo ancho y redondeado mejora el flujo, y el diseño de la punta acortada reduce la irritación de la mucosa gástrica.
- El conector de 3 vías se conecta con 2 conectores machos de ENFit y 2 tapas hembras de ENFit en el canal de alimentación y el canal de medicación. Cuando se detiene la alimentación o la medicación, la tapa hembra de ENFit se cierra la vía por tirar en el sentido de las agujas del reloj para evitar que el aire entre en el estómago.
- El anillo de fijación externa evita el desplazamiento del tubo y elimina la necesidad para la cinta o sutura.
- El conector ENFit puede prevenir el riesgo de desconexión y proporcionar un canal de alimentación y medicación más seguro para el paciente.



ESPECIFICACIONES

Sonda de Gastrostomía con conector ENFit

REF.	Tamaño	Balón	Largo	Marca de Profundidad	Descripción
2019-0512	12FR	5-10cc			- Anillo de silicona
2019-0514	14FR				- Conector macho ENFit*2
2019-0516	16FR	10-20cc		2	- Tapa hembra ENFit*2
2019-0518	18FR			4	
2019-0520	20FR		256 mm	6	- FEED: Alimentación
2019-0522	22FR	15-20cc		8	- MED: Medicación
2019-0524	24FR			10	
2019-0526	26FR				- Marca de profundidad
2019-0528	28FR				- Línea radiopaca

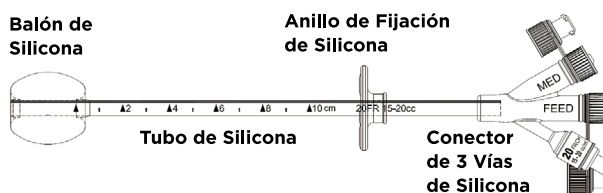

2019-05XX



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
 Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
 Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
 www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com