



TUBO GÁSTRICO DE SILICONA (TUBO DEL ESTÓMAGO)

Silicona para mejorar la comodidad del
paciente



GASTROENTEROLOGIC
SERIES


TUBO GÁSTRICO DE SILICONA (TUBO DEL ESTÓMAGO)

USOS PREVISTOS

El Tubo Gástrico de Silicona Fortune® es para alimentar la nutrición al estómago y es recomendable de varios usos : para paciente quien no puede comer o tragar, quien no come suficiente comida para mantener la nutrición, quien tiene defecto congénital de la boca, esófago o estómago.

Características de Tubo Gástrico de Silicona Fortune® (Tubo del Estómago):

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Tubo blando con excelente flexibilidad para aumentar la comodidad para el paciente.
- Punta cerrada para fácil inserción.
- Marca de profundidad para localizar la posición del tubo.

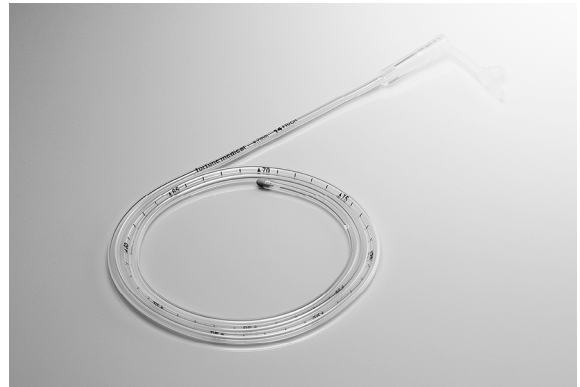

ESPECIFICACIONES

Tubo Gástrico (Tubo del Estómago):

REF.	Tamaño	Largo	Descripción	REF.	Tamaño	Largo	Descripción
2020-0004	4FR			2020-0012	12 FR		
2020-0005	5FR	400 mm	- Capuchón con tapa	2020-0014	14 FR		- Capuchón con tapa
2020-0006	6 FR		- Marca de profundidad	2020-0016	16 FR	1200 mm	- Marca de profundidad
2020-0008	8 FR	800 mm	- Línea radiopaca	2020-0018	18 FR		- Línea radiopaca
2020-0010	10 FR			2020-0020	20 FR		




2020-00XX

TUBO NASOGÁSTRICO CON CONECTOR ENFIT

Fortune® Tubo Nasogástrico de Silicona con Conector ENFit


- El tubo nasogástrico de silicona con conector ENFit de color morado es blando y flexible. El tubo incluye una punta ahusada para una inserción fácil y segura, y un soporte de silicona. Los componentes son de silicona de grado médico para mejorar la comodidad del paciente y la compatibilidad superior. Se reduce la incomodidad en contacto con el tubo.
- El Tubo transparente se facilita la inspección visual, y la línea radiopaca ayuda la confirmación fácil y precisa de la posición del tubo por rayos X.
- Marca de profundidad se ayuda para confirmar la posición del tubo.
- El conector macho ENFit se cierra con la tapa hembra ENFit cuando se detiene la alimentación. La tapa hembra ENFit se puede girar en el sentido de las agujas del reloj para evitar que el aire entre en el estómago.
- El conector ENFit puede prevenir el riesgo de desconexión y proporcionar un canal de alimentación y medicación más seguro para el paciente.

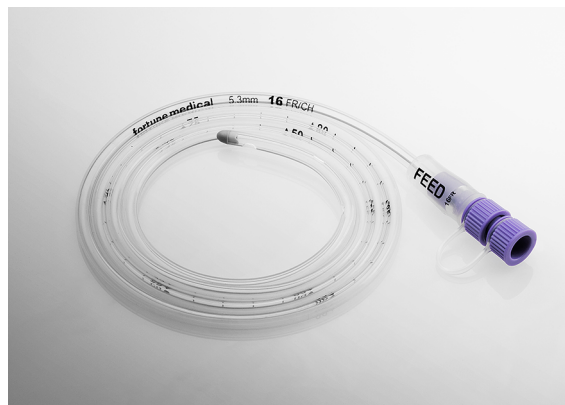

ESPECIFICACIONE

Tubo Nasogástrico de Silicona con Conector ENFit

REF.	Tamaño	Largo	Descripción
2020-0506	6FR	400 mm	
2020-0508	8FR	800 mm	- Conector macho ENFit
2020-0510	10FR		- Tapa hembra ENFit
2020-0512	12FR		- Marca de medida
2020-0514	14FR		- Marca de profundidad
2020-0516	16FR	1200 mm	- Línea radiopaca
2020-0518	18FR		
2020-0520	20FR		

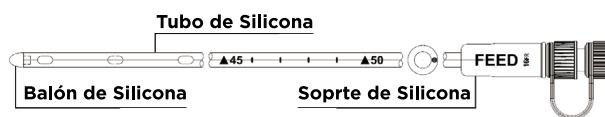

2020-05XX



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com