



# TUBO MÉDICO DE SILICONA



# TUBO MÉDICO DE SILICONA

---

El Tubo Médico de Silicona Fortune® puede ser utilizado en varias aplicaciones: drenaje, cateterización, circulación de aire, circulación de fluido, inyección, transfusión de sangre, inyección intravenosa, y tratamiento del circulación de sangre.

El tubo está hecho de silicona de grado médico con características de largo tiempo de caducidad, estimulación baja, no tóxico, insípito y inodoro. Además, la estructura química fuerte de silicona-oxígeno proporciona otras propiedades particulares:

## Temperatura resistente

Silicona aguanta la temperatura desde -150°F a +600°F (-101°C to +260°C), y puede ser esterilizada por muchas maneras incluido el oxido de etileno, la radiación Gamma, esterilización de vapor.

## Biocompatibilidad

Silicona tiene una biocompatibilidad superior con el tejido humano y el fluido corporal. Disminuye la adhesión y la oclusión de la solución medical, el fluido corporal, el coágulo y los detritos del tejido.

## Propiedad mecánica


Silicona tiene una excelente resistencia al desgarro y la fuerza de tensión, el alargamiento, flexibilidad y el durómetro de 5 a 90 Shore A.

## Propiedad eléctrica

Silicona es no conductivo y es con buenas propiedades aislantes y de flexibilidad en la aplicación electrónica.

## Resistencia Química

Silicona es resistente al agua, embolia, grasa, sangre, orina, solución medical y varias químicas como algunos ácidos, químicas oxidantes, y alcohol isopropílico. Nota que la silicona no se puede utilizar con alcalinos y solventes.

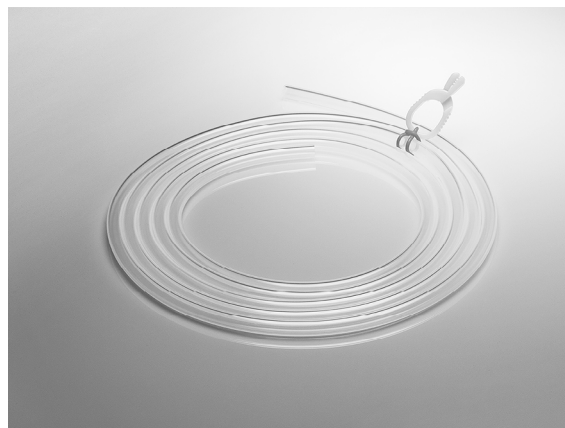

# TUBO MÉDICO DE SILICONA

## ESPECIFICACIONES

### Tubo Médico:

Sin línea radiopaca REF.	Con línea radiopaca REF.	Diámetro Interior	Diámetro Exterior	Durómetro	Descripción
40-025040	45-025040	2.5 mm	4.0 mm		
40-040055	45-040055	4.0 mm	5.5 mm	45 ± 5	- Tipo S
40-050070	45-050070	5.0 mm	7.0 mm	Shore A	- Lumen singular
40-060080	45-060080	6.0 mm	8.0 mm		- 30M/rollo
40-070095	45-070095	7.0 mm	9.5 mm		
60-005010	-	0.5 mm	1.0 mm		- Tipo H
60-010015	-	1.0 mm	1.5 mm	65 ± 5	- Lumen singular
60-010020	-	1.0 mm	2.0 mm	Shore A	- 10M/rollo
60-020030	-	2.0 mm	3.0 mm		
60-025040	65-025040	2.5 mm	4.0 mm		
60-040055	65-040055	4.0 mm	5.5 mm		
60-050070	65-050070	5.0 mm	7.0 mm		
60-060080	65-060080	6.0 mm	8.0 mm	65 ± 5	- Tipo H
60-070095	65-070095	7.0 mm	9.5 mm	Shore A	- Lumen singular
60-080110	65-080110	8.0 mm	11.0 mm		- 30M/rollo
60-090120	65-090120	9.0 mm	12.0 mm		
60-100140	65-100140	10.0 mm	14.0 mm		

\*Medida personalizada, forma, lumenes multiples, línea radiopaca y colores son disponible al pedido.



**fortune  
medical**

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,  
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan  
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266  
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com